

Varoitus! Tämä symboli ilmaisee tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja. Noudata näitä ohjeita huolellisesti.



Lue käyttöohje ennen käyttöä! On tärkeää, että ymmärrät käyttöohjeen sisällön, ennen kuin yrität käyttää laitetta.

CE

15.12.2021

Asiakirjan numero: M10-552/554FI rev.02

Käyttötarkoitus

Käsivarren ja jalan tuet on tarkoitettu tukemaan ja pitämään potilaan käsivarsi ja jalka leikkauspöydällä leikkauksen ja kuljetuksen aikana. Tuote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön terveydenhuollon yksikössä.





Turvallisuusmääräykset

Enimmäiskuormitus: 10 kg tasaisesti jakautuneena; standardien EN 60601-1 ja EN 60601-2 mukainen.

Varmista oikea toiminta ennen käyttöä!



MAX 10 kg

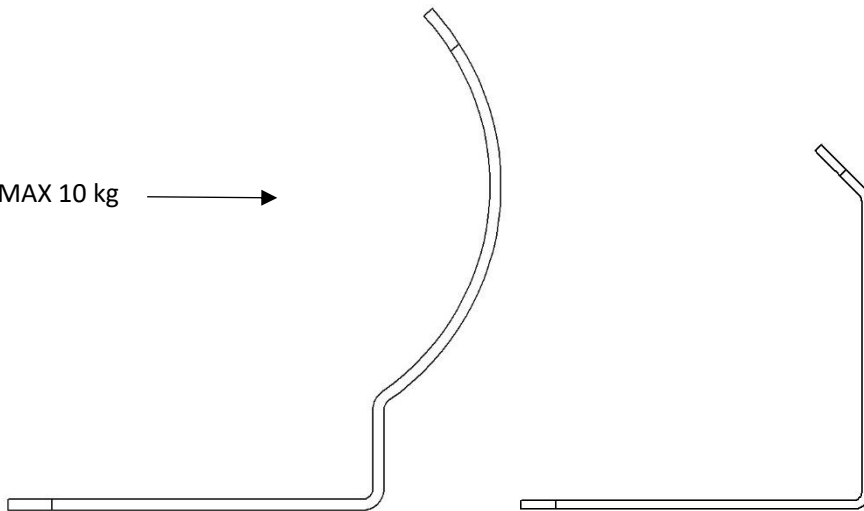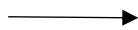

Käyttöohjeet

Asentaminen

Käsivarren ja jalan tukien tasainen osa sijoitetaan leikkauspöydän patjan alle. Potilaan paino pitää käsivarren ja jalan tuet paikallaan.

Puhdistaminen

Puhdista antiseptisellä pesuaineella (pH 6–8) ja lämpimällä vedellä. Etanolia voi käyttää. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaasti hapanta tai emäksistä pesuainetta.

Tarkistaminen

Tarkista, ettei mikään osa ole vahingoittunut. Tarkista, että suojus on puhdas ja ehjä, jos se on käytössä.

Tarvikkeet

Tuotenro	Kuvaus
10-553	Pehmustettu suojus tuotteeseen 10-552
10-555	Pehmustettu suojus tuotteeseen 10-554
10-557	Pehmustettu suojus tuotteeseen 10-556

Tekniset tiedot

Tuotenro	UDI-DI	Enimmäiskuoritus	Mitat (K x L x P)	Paino	Materiaali
10-552	07350111831851	10 kg	230 x 230 x 565 mm	1,5 kg	PETG
10-554	07350111831868	10 kg	210 x 200 x 400 mm	0,9 kg	PETG
10-556	07350111832667	10 kg	230 x 230 x 300 mm	0,8 kg	PETG

medi⁺
HEALTH

Tilaukset: tilaukset@medihealth.fi Tiedustelut: info@medihealth.fi
Medihealth Oy, Haarasuonkuja 5 90240 Oulu, y-tunnus 3131118-6, www.medihealth.fi