

Varoitus! Tämä symboli ilmaisee tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja. Noudata näitä ohjeita huolellisesti.



Lue käyttöohje ennen käyttöä! On tärkeää, että ymmärrät käyttöohjeen sisällön, ennen kuin yrität käyttää laitetta.

CE

3.3.2021

Asiakirjan numero: M10-398FI rev.01

Käyttötarkoitus

Käsivarren leikkauspöytä potilaan käsivarren sijoittamiseen käsivarsi- ja käsikirurgian aikana. Tuote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön terveydenhuollon yksikössä.




Turvallisuusmääräykset

Enimmäiskuormitus: 32 kg tasaisesti jakautuneena, mikä vastaa 300 kg painavaa potilasta; standardien EN 60601-1 ja EN 60601-2 mukainen.

Varmista oikea toiminta ennen käyttöä!


Irrota käsivarren leikkauspöytä kuljetuksen ajaksi!

Huollon ja ennaltaehkäisevän huollon toimenpiteitä saa suorittaa vain valtuutettu henkilöstö.

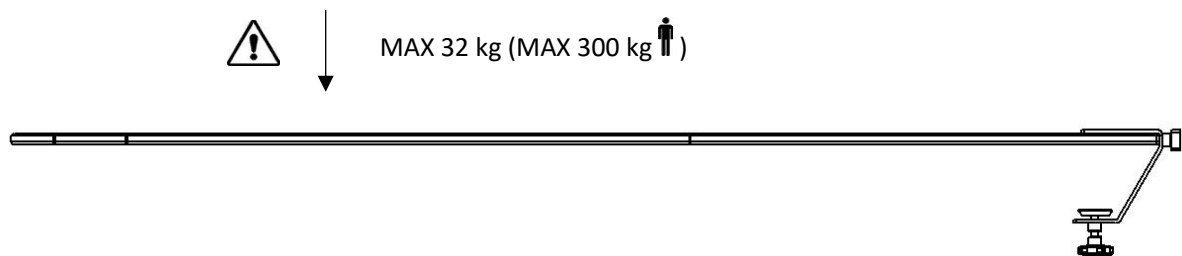

Käyttöohjeet

Asentaminen

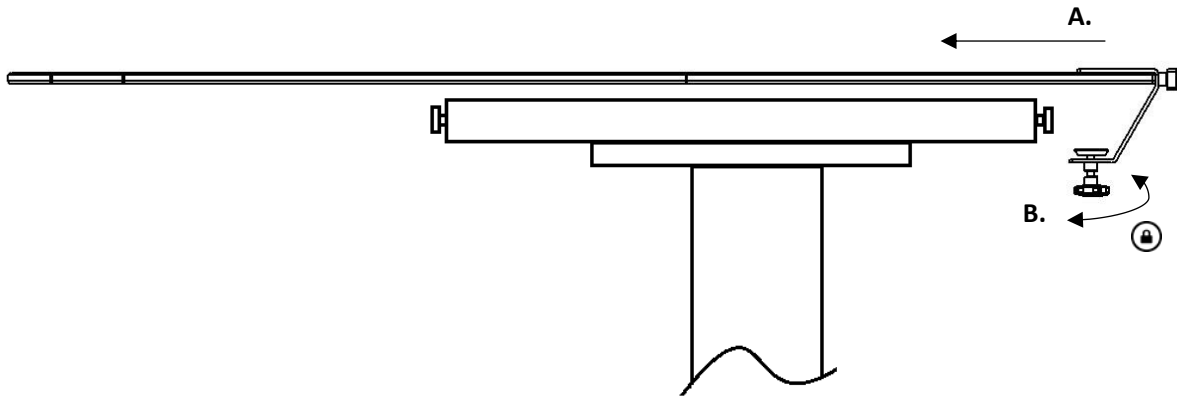

Ylläpito

Huollon ja ennaltaehkäisevän huollon toimenpiteitä sekä säätö- ja korjaustoimenpiteitä saa suorittaa vain valtuutettu henkilöstö. Rakenteen muuttaminen ilman valmistajan kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty.

Puhdistaminen

Puhdista antiseptisellä pesuaineella (pH 6–8) ja lämpimällä vedellä. Etanolia voi käyttää. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaasti hapanta tai emäksistä pesuainetta.


Tarkistaminen

Tarkista, ettei mikään osa ole löystynyt ja että kaikki osat ovat ehjiä. Tarkista pöydän lukitustoiminto. Tarkista, että pehmuste on puhdas ja ehjä, jos se on käytössä.

Vuosihuolto

Käsivarsipöytä on kerran vuodessa puhdistettava huolellisesti, liikkuvat osat on voideltava ja lukitustoiminto on testattava.

Varaosat

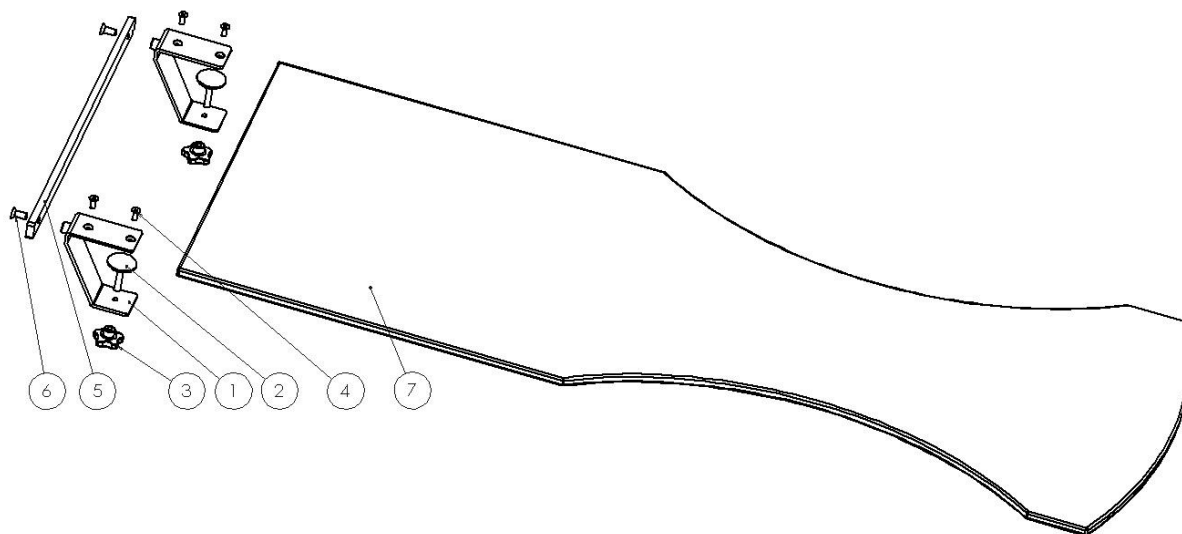

Nro	Kuvaus	Kpl	Tuotenro
1.	Kiinnike	2	11427
2.	Säädettävä liukutappi	2	SF3222 M8x70S
3.	Nuppi	2	VC 192/40 B-M8
4.	Ruuvi MF6S M6x16 A2	4	-
5.	Kisko	1	11428
6.	Ruuvi MF6S M8x20 A2	2	-
7.	Levy	1	11384

Tekniset tiedot

Enimmäiskuormitus	32 kg tasaisesti jakautuneena, mikä vastaa 300 kg painavaa potilasta; standardien EN 60601-1 ja EN 60601-2 mukainen.
Paino	5,1 kg
Mitat (K x L x P)	140 x 520 x 1 370 mm
Levyn paksuus	13 mm
Käsivarren leikkauspöydän materiaali	Hiilikuitu Ruostumaton teräs
UDI-DI	07350111830892

medi⁺
HEALTH

Tilaukset: tilaukset@medihealth.fi Tiedustelut: info@medihealth.fi
Medihealth Oy, Haarasuonkuja 5 90240 Oulu, y-tunnus 3131118-6, www.medihealth.fi